ANNAR Health Technologies | BIONOTE | Unidad de Negocio Salud Animal

VCHECK C2

Diagnóstico veterinario más flexible, rápido y preciso.

Flexibilidad para cada caso clínico

Compatibilidad con múltiples tipos de muestra



Resultados en minutos

Analizador automatizado que integra múltiples perfiles de prueba y ofrece **resultados confiables en minutos.**

Un sistema, dos formas de trabajar:



Rotor Circular:


Ideal para perfiles bioquímicos completos y evaluaciones integrales. Hasta 28 parámetros en una sola prueba.



Rotor Sectorial:

Permite ejecutar únicamente los análisis que realmente necesita. Configure hasta tres paneles simultáneamente en una misma corrida.

Combinaciones de pruebas flexibles:

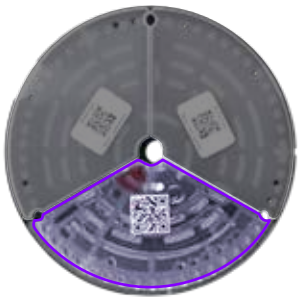

1 Panel

1 sector de rotor + Soporte de ranura única



2 Paneles

2 rotores sectoriales + Soporte de doble ranura



3 Paneles

3 rotores sectoriales + Portador

02

Química clínica POCT con rotor

¿Cómo funciona Vcheck C2 Rotor?

Cuantificación de muestras


- Cuantificación de plasma o suero mediante centrífuga integrada.
- Mezcla precisa con diluyente para garantizar una preparación uniforme.

Resultados comprobados

- Reconocimiento automático de reactivos mediante código de barras 2D.
- Resultados confiables gracias al sistema de control de calidad integrado.

Verificación de resultados


- Reactivos específicos para cada parámetro, contenidos en cada pocillo.
- Cálculo de concentraciones mediante análisis colorimétrico.

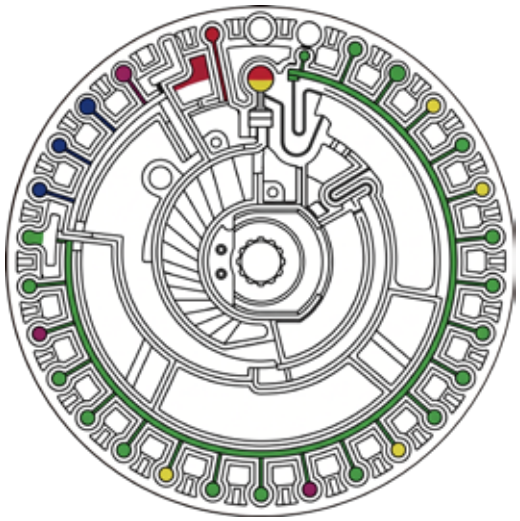

annarht.com

Procedimiento de prueba sencillo en 3 pasos

1 Añadir la muestra

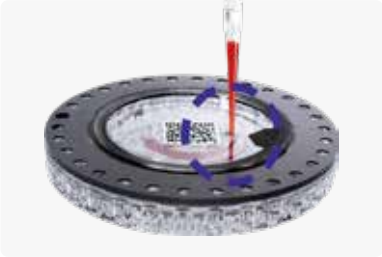

2 Insertar el rotor



3 Resultados en 12 minutos



Especificaciones



Categoría	Detalles
Tipo de analizador	Química
Tipo de muestra	Sangre total, suero, plasma
Volumen de muestra	Rotor circular: 100 µL - Rotor sectorial: 100 µL
Tiempo de análisis	10-12 minutos
Dimensiones (mm)	210 x 263 x 280
Peso	4,2 kg
Muestras por serie	Hasta 3 muestras
Almacenamiento	Hasta 500,000 pruebas
Pantalla	Pantalla táctil de 7,0 pulgadas
Comunicación	USB, Ethernet, puerto LAN
Interfaz	LIS/HIS (compatible con el perfil HL7)
Tensión de entrada	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	100 VA
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10-26 °C - Humedad: 0-85 %

Menú de pruebas

Reactivo	Panel	Referencia	Parámetros	Tipo de tubo para muestra
Rotores Sectoriales	Sector Basic 6	VC7715RDENN	BUN, CREA, ALT, AST, ALP, B/C*	 Tubo tapa roja y verde (con heparina de litio) ad-bio®
	Sector Kidney Panel 4	VC7713RDENN	BUN, CREA, PHOS, B/C*	
	Sector Liver Panel 3	VC7716RDENN	ALT, GGT, TB	
	Sector Diabetes 4	VC7717RDENN	GLU, FRUC, TG, TC	
	Sector Electrolyte 6	VC7714RDENN	PHOS, Ca, Na^+, K^+, Cl^-, Na/K *	
	Sector ALT	VC7719RDENN	ALT	
	Sector BUN	VC7718RDENN	BUN	
	Sector CREA	VC7720RDENN	CREA	
	Sector AST	VC7722RDENN	AST	
	Sector TBA	VC7721RDENN	TBA	

Temperatura de Almacenamiento: 2-8°C (*)Valores calculados

annarht.com

Reactivo	Panel	Referencia	Parámetros	Tipo de tubo para muestra
Rotores Circulares	Rotor Comprehensive 28	VC7727RDENN	GLU, BUN, Crea, Phos, Ca, tCO, TP, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBA, TB, AMY, LIPA, TG, TC, CK, LDH, UA, Na+, K+, Cl-, A/G*, B/C*, GLOB*, Na/K*	 Tubo tapa roja y verde (con heparina de litio) ad-bio®
	Rotor Comprehensive 24	VC7702RD	GLU, BUN, CREA, PHOS, Ca, tCO_2, TP, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBA, TB, AMY, LIPA, TG, TC, CK, LDH, UA, A/G*, B/C*, GLOB*	
	Rotor Basic 16	VC7709RD	GLU, BUN, CREA, PHOS, Ca, TP, ALB, ALT, AST, TB, AMY, TG, CK, A/G*, B/C GLOB*	
	Rotor Presurgical 10	VC7703RD	GLU, BUN, CREA, TP, ALB, ALT, ALP,* A/G*, B/C*, GLOB*	
	Rotor Comprehensive 17	VC7707RD	GLU, BUN, CREA, Na^+, K^+, TP, ALB, ALT, ALP, TB, CHE, AMY, UA, A/G*, B/C*, GLOB*, Na/K*	
	Rotor Basic 10	VC7712RD	GLU, BUN, CREA, TP, ALT, AST, ALP, CK, LDH, B/C*	
	Rotor Liver Panel 11	VC7706RD	TP, ALB, ALT, AST, ALP, GGT, TBA, TB, TC, A/G*, GLOB*	
	Rotor Kidney Panel 10	VC7705RD	GLU, BUN, CREA, CysC (Canine), PHOS, Ca, tCO_2, ALB, UA, B/C*	

Temperatura de Almacenamiento: 2-8°C (*)Valores calculados

Reactivo	Panel	Referencia	Parámetros	Tipo de tubo para muestra
Rotores circulares	Rotor Ammonia One	VC7711RD	NH_3	 Tubo tapa verde (con heparina de litio) ad-bio®
	Rotor Electrolyte 14	VC7704RD	GLU, BUN, CREA, PHOS, Ca, Na+,K+, CL, Mg, tCO_2, pH, LAC, B/C*, Na/K*	
	Rotor Diabetes 9	VC7708RD	GLU, FRUC, LAC, ALT, AST, AMY, LIPA, TG, TC	

Temperatura de Almacenamiento: 2-8°C (*)Valores calculados

Reactivo	Panel	Referencia	Parámetros	Tipo de tubo para muestra
Rotores circulares	Rotor Coagulation 4	VC7710RD	PT, APTT, TT, FIB	 Tubo tapa azul (con citrato de sodio) ad-bio®

Temperatura de Almacenamiento: 2-8°C (*)Valores calculados

Información comercial

PBX: (1)744 7979 • Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Email: serviciocliente@annardx.com • Av. Cl 20 No.39-79 Bogotá - Colombia

©2026 ANNAR Health Technologies. Todos los derechos reservados. Contenido exclusivo para uso de los profesionales de la salud, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular. Las marcas utilizadas en el presente contenido son marcas registradas a favor de su titular o propietario.