



IPONATIC

- I** Inteligente
- PO** Portátil
- NAT** Test de Ácido Nucleico
- IC** En Cartucho

Human Papillomavirus DNA Diagnostic Kit 13+2 a través de RT-qPCR

 Fácil	 Inteligente	 Rápido	 Sencillo
<p>Baja experticia, integración de extracción y amplificación, menos requerimientos de infraestructura.</p>	<p>Analiza los resultados automáticamente, visualización de curvas de amplificación, reporte de CT impresora integrada.</p>	<p>Obtención de resultados en pocos minutos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reactivos listos para su uso. • Reactivos preenvasados. • Corto tiempo de manualidad.

Virus del Papilloma Humano

Los estudios muestran que la infección persistente del Virus del Papilloma Humano es la principal causa de carcinoma cervical y cáncer precanceroso.

El **ADN** de los genotipos de **VPH** de alto riesgo puede ser detectado en el **99,7%** de las pacientes con carcinoma de cuello uterino. Debido a esta relación, es esencial realizar pruebas de tamizaje capaces de detectar los genotipos de **VPH** asociados al desarrollo de lesiones cancerosas.




Human Papillomavirus 13+2 DNA diagnostic kit (PCR-sondas marcadas con fluorescencia)



- Detección diferenciada de Genotipo 16 y Genotipo 18.
- Genotipos del grupo de alto riesgo (31,33,35,39,45,51,52, 53,56,58,59,66,68). Grupo de riesgo medio 53 y 66.
- Tiempo de procesamiento: 30 min aproximadamente (extracción y amplificación por PCR).
- Tipo de muestras: Secreciones del tracto genital en solución salina y compatible con medios para citología líquida.
- Presentación: Kit x 24 tests.

Características

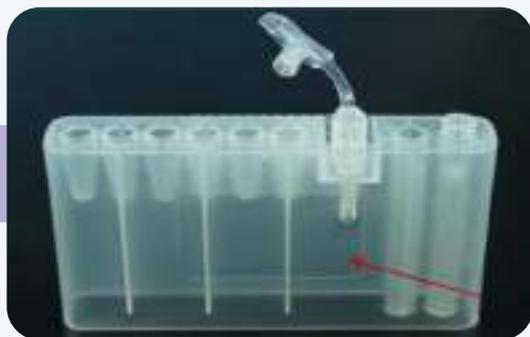



Cartucho de procesamiento



Reactivos pre-dispensados

Características del producto	Parámetros
Especificación del kit	Tecnología avanzada de perlas magnéticas
Sistema anti-contaminación	UNG enzyme + dUTP system
Instrumento PCR	IPonatic (S-Q31A)
Límites de detección	1 copia/ μ L
Certificados obtenidos	CE

Emisión de curvas de amplificación

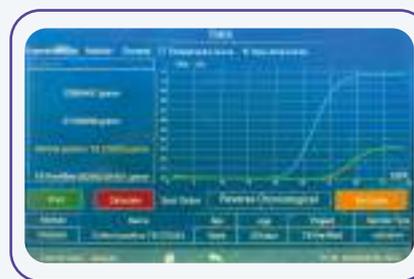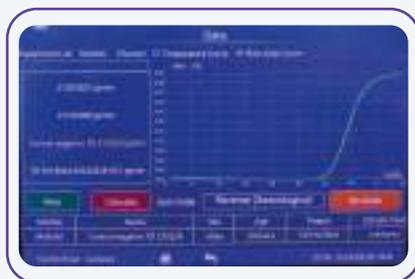



¡Conócenos!



Esríbenos a:
serviciocliente@annardx.com

PBX: (1)744 7979

Línea gratuita nacional:

018000 189 999

Sede principal: Av. Cl 20 No.39-79
Bogotá - Colombia

in Annar

 Annar Health Technologies

 Escúchanos en Spotify: ANNAR VOICE

©2024 ANNAR Health Technologies.

Todos los derechos reservados. Contenido exclusivo para uso de los profesionales de la salud, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

Las marcas utilizadas en el presente contenido son marcas registradas a favor de su titular o propietario.

ANNAR-DX-IPONATIC-DE-SANSURE-MTB-ID-BROCHURE-IMP-JUNIO2024