



Información sobre pedido

CAPILLARYS 3 DBS

Instrumento

• CAPILLARYS 3 DBS1244

Reactivos

• CAPI 3 NEONAT Hb2506

• CAPI 3 NEONAT Hemolysing solution2563

Controles/Calibradores

• CAPI 3 NEONAT Hb AF Control4757

• Hb AFSC Control4792

Consumibles


• CAPILLARYS 3 DBS Microplacas
(10 unidades - microplacas con código de barras
de 96 pocillos)2578

• CAPILLARYS 3
CAPICLEAN2060

• CAPILLARYS 3
Wash Solution2062

• CAPILLARYS 3
Copas de reactivos (24x14 unidades)2582

Escanee aquí
para obtener más
información
sobre el
CAPILLARYS 3 DBS:

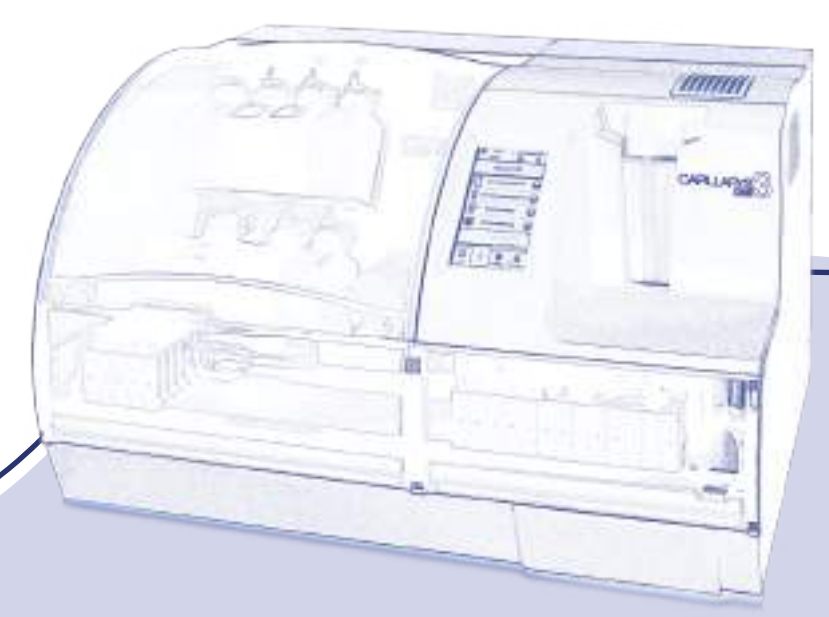

Sebia | RCS Evry 672 041 902 | Parc technologique Léonard de Vinci | 27, rue Léonard de Vinci | CP 8010 Lisses | 91008 Evry cedex | France | Tel. : +33 1 69 89 80 80 | E-mail : sebia@sebia.com | www.sebia.com

Benelux | Tel.: +32 2 702 64 64 (BE) | Tel.: +31 20 610 8099 (NL) | E-mail: sebia.benelux@sebia.com • Brasil | Tel.: +55 11 3849 0148 | E-mail: brasil@sebia.com
Canada | Tel.: +1 (888) 725-3013 | Fax: +1 (438) 380-3780 | E-mail: canada@sebia.com • China | Tel.: +86 (21) 6360 1436 | Fax: +86 (21) 6361 2011 |
E-mail: china@sebia.com • Germany & Austria | Tel.: +49 (0) 661 33081 | Fax: +49 (0) 661 31881 | E-mail: sebia@sebia.de • India | Tel.: +91 124 4262100 |
E-mail: sebiaindia@sebia.com • Italy | Tel.: +39 055 24851 | Fax: +39 055 0982083 | E-mail: info@sebia.it • Japan | Tel.: (03) 5830-0139 | Fax: (03) 5830-0140
Portugal | Tel.: +351 211 224 653 | Fax: +351 211 305 079 | E-mail: portugal@sebia.com • Spain | Tel.: +34 93 208 15 52 | Fax: +34 93 458 55 86 |
E-mail: sebia@sebia.es • Singapore | Tel.: +65 6223 2273 | E-mail: singapore@sebia.com • Switzerland | Tel.: +41 44 787 88 10 | E-mail: contactch@sebia.com
UK | Tel.: +44 (01276) 600636 | Fax: +44 (01276) 38827 | E-mail: sales@sebia.co.uk • UAE | Tel.: +971 (0)4 878 69 77 • USA | Tel.: +1 (770) 446-3707 - Fax: +1 (770) 446-8511 |
E-mail: info@sebia-usa.com

©2021 Sebia - Las ilustraciones no son contractuales - 11/2021 - Ref. : C3DBSBIES - Sebia se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso la información contenida en este documento destinado a los profesionales sanitarios. Este documento contiene información destinada a una amplia distribución y, por lo tanto, puede contener detalles del producto o información que no está disponible o no es válida en su país. Lea atentamente las instrucciones de los insertos del paquete de reactivos y los manuales del instrumento.

La solución perfecta para la detección de trastornos de la hemoglobina en recién nacidos



Solución de alto rendimiento para el cribado neonatal



El cribado neonatal de hemoglobina nunca ha sido tan fácil...

MUESTREO

PERFORACIÓN

ELUCIÓN

ANÁLISIS

RESULTADO

Principales beneficios

1

Facilidad de uso, velocidad y **reducción del tiempo de manipulación.**

2

Los avisos automáticos en los resultados le permiten **concentrarse en muestras patológicas.**

3

Detección clara de **variantes de hemoglobina** (S, C, D, E ...) así como Talasemia (Hb Barts).

4

La **detección temprana** de los trastornos de la hemoglobina permite un tratamiento y seguimiento adecuados, **mejorando la vida del bebé** mientras tranquiliza a los padres.

Características clave



Instrumento de alto rendimiento

70 muestras/hora



Trazabilidad total

Desde la perforación de la muestra hasta el resultado



Gran autonomía

Se pueden analizar 8 microplacas completas de 96 pocillos en una sola serie



Control automático de reactivos

RFID para todos los reactivos y control de Hb AF



Excelente resolución

Migración de alto voltaje y temperatura controlada




Identificación presuntiva automática del patrón de hemoglobina


Verificación rápida de muestras patológicas contra muestras no patológicas (codificadas por colores) debido a la interpretación automática del software

Ejemplos de resultados

FA + Bart

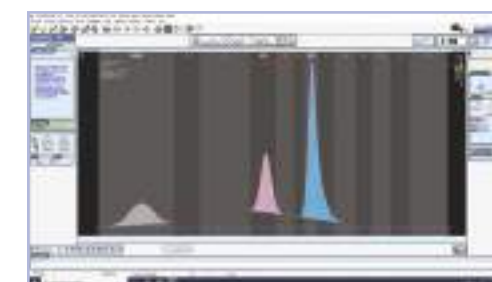

FS (Anemia de Células Falciformes)

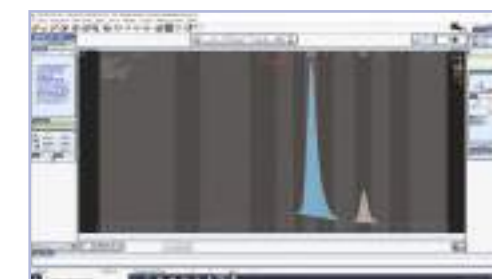

FSC (Enfermedad de Células Falciformes)

