

Tiroideos	Enfermedad infecciosa	Fertilidad	Marcador de tumor
FT3	Combo HIV	β-HCG total	CEA
FT4	HBsAg	FSH	AFP
T3	Anti-HBs	LH	CA125
T4	HBeAg	Prolactina	CA15-3
TSH	Anti-HBe	E2	CA19-9
Anti-TG	Anti-HBc	E3	FPSA
Anti-TPO	Anti-HCV	TESTO	TPSA
Tg	Anti-TP (Sífilis)	PROG	NSE
rT3	HBeAg cuantitativo*	Testosterona* libre	CYFRA 21-1
TRAB*	Anti-HBc IgM*	17-OH PROG*	CA72-4
		SHBG*	PG I
		AMH*	PG II
Hueso	Cardiaco	Diabetes	SCCA
Metabólico	CK-MB	Insulina	HE4
PTH intacto	Mioglobina	C-péptido	ProGRP
Calcitonina	Troponina I		CA50
Vitamina D total	BNP		CA242
Función adrenal	Fibrosis de hígado	ToRCH	Anemia
DHEA-S	LN	Toxo IgG*	Ferritina
Cortisol	HA	Toxo IgM*	Vitamina B12
ACTH	PIIINP	Rubeola IgG*	Ácido fólico
	CIV	Rubeola IgM*	Ácido fólico RBC
		CMV IgG*	
Hipertensión	Hormona de crecimiento	CMV IgM*	Inflamación
Angiotensina I*	hGH*	HSV-1/2 IgG*	PCT
Angiotensina II*	IGF-1*	HSV-1/2 IgM*	
Renina*		HSV-1 IgG*	
Aldosterona*		HSV-2 IgG*	
Selección DS'			
PAPP-A*			
β-HCG* libre			
	*: en desarrollo		

Especificaciones técnicas

Información general	
Rendimiento	Hasta 180 tests por hora
Principio de medición	Plataforma de partículas superpara magnéticas de micrón Con reactivos etiquetados de fosfatasa (ALP) alcalina Y sustrato AMPPD
Ensamblaje de muestra	
Alimentador de muestra	Carga y descarga continua de muestra
Posiciones de muestra	50
Sonda de muestra	Sonda de acero, detección de nivel de líquido, detección de coágulos, Protección contra colisión horizontal y vertical
Volumen de muestra	10-200 ul, con incremento de 1 ul
Dilución de muestra	Dilución automática con 1:2~1:40
Ensamblaje de reactivo	
Disco de reactivo	15 posiciones de reactivo, carga continua. Mezcla en tiempo real para partículas magnéticas
Sistema de refrigeración	2-8 °C
Paquete de reactivo	50 tests/paquete, 100 tests/paquete
Escaneado de reactivo	Integrado/Lector de código de barras externo
Sonda de reactivo	Sonda de acero, detección de nivel de líquido, detección de coágulos, Protección contra colisión horizontal y vertical
Volumen de reactivo	10-200 ul, con incremento de 1 ul
Sistema de sustrato	
Botella de sustrato	300/500 tests por botella, agujereado del fondo
Carga de sustrato	Capacidad de carga continua durante el test
Calentamiento de sustrato	Calentamiento continuo
Volumen de aspiración	200 ul
Unidad de separación magnética	
Ensamblaje de separación	Separación magnética de 3 fases
Temperatura	Precisión: 37±0,3 °C



CL-900i

Sistema de inmunoensayo de quimioluminiscencia

Medición y Sistema de reacción	
Modo de detección	Conteo de fotón
Detector de señal	Contador de fotón de Fotomultiplicador (PMT)
Calibración de PMT	Módulo de referencia de LED
Posiciones de incubación	82
Temperatura	Precisión: 37±0,3 °C
Unidad de mezcla	Mezclado de agitador vórtex no táctil
Carga de cubeta y Recogida de desechos	
Cubeta	Cubeta de plástico desechable
Carga de cubeta	88 cubetas por bandeja, se pueden cargar dos bandejas en un lote, carga y descarga continua
Recogida de desechos	Contenedor de desechos, 200 cubetas por caja
Condiciones de trabajo	
Alimentación	100-240 V~50/60 Hz
Potencia de entrada	500 VA
Temperatura de funcionamiento	15-30 °C
Humedad relativa	35 %RH~85 %RH, sin condensación
Dimensiones	860 mm x 740 mm x 560 mm (An x Fo x Al)
Peso	132 kg
Altura	-400 m - 3000 m (70 kpa)






Uno de los más pequeños del mundo; analizadores CLIA totalmente automatizados


CL-900i El tamaño perfecto para su laboratorio



Separación magnética precisa con fiabilidad de rendimiento consistente

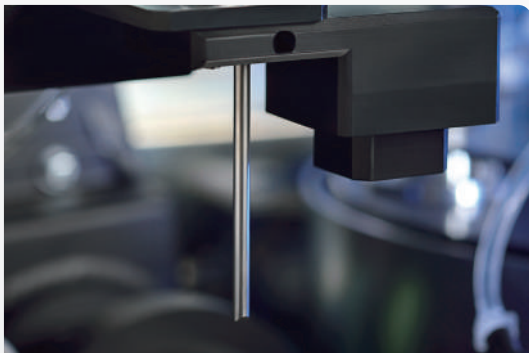


Separación de desechos sólidos-líquidos
Respetuoso con el medio ambiente

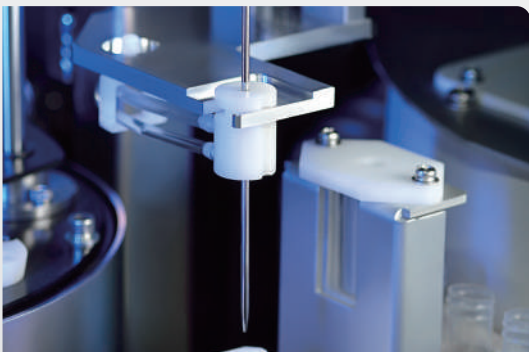

Tecnología de lavado por escobillas
Eficiencia mejorada y sobrante minimizado



Inicio con un solo botón
Extremadamente fácil de usar

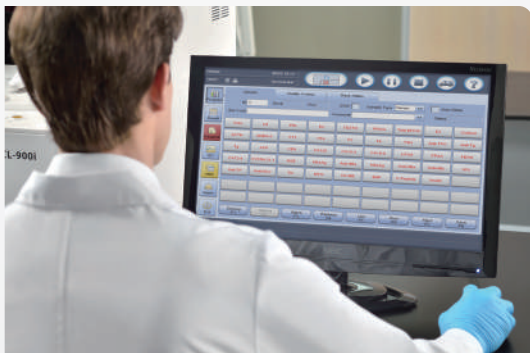

Interfaz de software intuitiva
Acceso fácil a todas las funciones



Carga continua de reactivos y consumibles



Sin necesidad de mantenimiento por parte del usuario
Reduce la carga de trabajo



Gestión inteligente de consumibles